BIOS living™

FAUTEUIL ROULANT
Mode d'emploi
56053



Nous vous remercions de l'achat du fauteuil roulant BIOS Living[MC]. Ce modèle pliant est facile à utiliser, s'adapte à la plupart des véhicules et se range aisément lorsqu'il n'est pas utilisé.


Remarque : Les spécifications et les informations les plus récentes sur le produit ont été compilées dans le manuel du propriétaire au moment de la publication. Thermor se réserve le droit de faire des changements, lesquels peuvent causer de légères variations entre l'illustration et les explications fournies dans ce manuel et le produit acheté.

Veuillez lire ces instructions avant d'assembler ou d'utiliser ce fauteuil roulant et conservez-les dans un endroit sûr.

NE PAS ASSEMBLER OU NE PAS UTILISER ce fauteuil roulant sans avoir préalablement lu et compris le mode d'emploi.

Remarque : Les boulons de raccordement sur la base du fauteuil ne sont pas vissés fermement de façon intentionnelle afin de permettre le fonctionnement du fauteuil roulant et ils n'ont pas besoin d'être resserrés.

⚠ Pour votre sécurité personnelle :

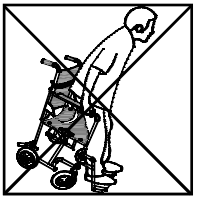

- **Le fauteuil roulant peut venir en aide à une personne pesant jusqu'à 136 kg (300 lb).**
- Ne vous tenez pas debout sur les repose-pieds car le fauteuil roulant pourrait basculer.
- Avant d'utiliser le fauteuil roulant, assurez-vous qu'il n'y ait **AUCUN** boulon desserré. Dans l'éventualité où il y aurait des boulons desserrés, resserrez-les. Il est recommandé que les boulons soient vérifiés tous les trois mois.

- Lorsque vous utilisez le fauteuil roulant, évitez les obstacles pour empêcher le fauteuil de basculer.
- Assurez-vous que le fauteuil roulant est complètement ouvert dans une position sécuritaire avant de l'utiliser.
- Soyez prudent lorsque vous levez et/ou transportez le fauteuil roulant.
- Assurez-vous que le dossier est verrouillé solidement **AVANT** d'utiliser ce fauteuil roulant.
- **NE TENTEZ PAS** d'atteindre des objets si vous avez à vous déplacer vers l'avant du siège.
- **NE TENTEZ PAS** d'atteindre des objets si vous avez à les ramasser par terre en vous penchant entre vos genoux.
- **NE VOUS PENCHEZ PAS** au-dessus du dossier rembourré car ce mouvement changera votre centre de gravité et vous pourriez basculer.
- **N'INCLINEZ PAS** le fauteuil roulant sans aide.
- **N'UTILISEZ PAS** un escalier mécanique pour déplacer le fauteuil roulant entre les étages. Des blessures corporelles graves pourraient se produire.
- Les dispositifs de blocage des roues **NE SONT PAS** des freins. **NE TENTEZ PAS** d'arrêter un fauteuil roulant en déplacement avec les dispositifs de blocage des roues.
- **NE TENTEZ PAS** de monter ou de descendre une pente si la surface est glissante ou mouillée.
- Pour nettoyer le fauteuil, essuyez-le avec un chiffon doux humide. Séchez-le dans les plus brefs délais s'il est mouillé.

Instructions pour le montage

Veuillez examiner le fauteuil roulant pour la présence de tout dommage qui aurait pu survenir pendant l'expédition. Si des dommages sont apparents, **NE PAS** utiliser le fauteuil roulant et contacter Thermor au numéro **1 866 517-2970** ou par l'entremise du site Web **www.biosmedical.com.**




1. Ouvrez le châssis du fauteuil roulant à sa pleine largeur en abaissant les deux côtés du siège.

2. Retirez le film étirable sur les roues.

3. Pour ajuster la hauteur des repose-pieds, desserrez le boulon à l'extrémité de la tubulure du châssis. Allongez ou écourtez la hauteur, puis resserrez le boulon.

4. Insérez chaque repose-pied dans la tubulure du châssis à l'avant du fauteuil et tournez-les jusqu'à ce qu'ils soient en position normale de fonctionnement.


Diagramme du fauteuil roulant

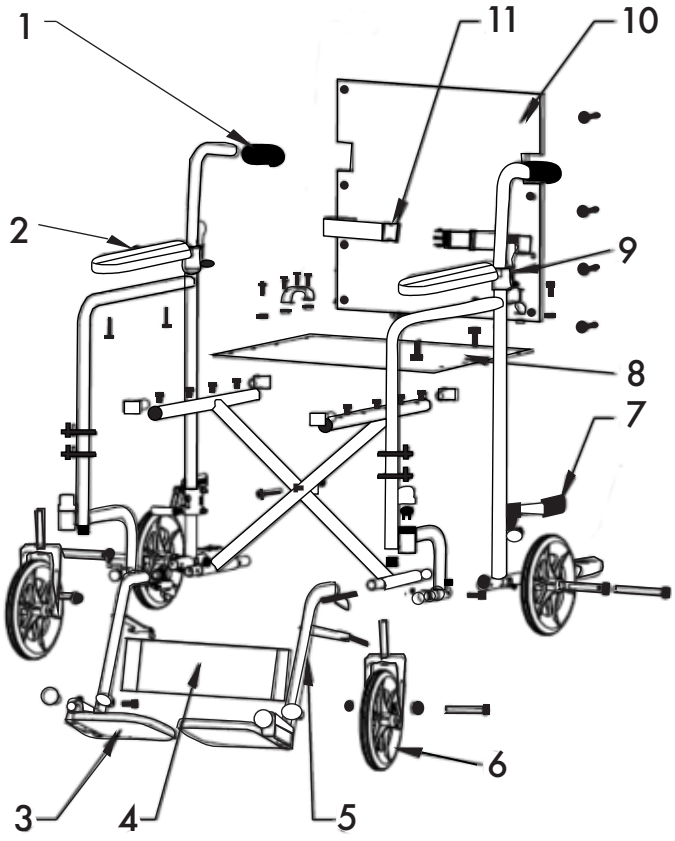


1. Poignées
2. Appuis-bras
3. Repose-pieds
4. Sangle de maintien des jambes
5. Tubulure du châssis
6. Roues de 8 po/20 cm
7. Dispositifs de blocage des roues
8. Siège rembourré
9. Poignée repliable
10. Dossier
11. Ceinture de siège

Pliage du fauteuil roulant


1. Tournez les repose-pieds de façon à ce qu'ils soient en position verticale.

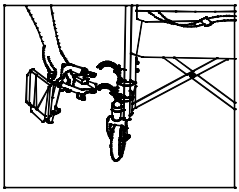

2. Relevez simultanément les deux sangles pour plier le fauteuil

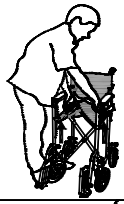

3. Pour plier le dossier, poussez sur les leviers derrière le dossier pour libérer la tige de positionnement. Rabattez le dossier.

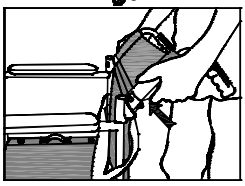

Avant de tenter de transférer une personne vers ou depuis un fauteuil roulant, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour réduire la distance entre les deux positions. Si l'occupant doit être transféré sur un autre objet, tournez les deux roulettes parallèles à l'objet. Lors d'un transfert, vers et depuis le fauteuil roulant, **ENGAGEZ TOUJOURS LES DEUX DISPOSITIFS DE BLOCAGE DES ROUES**. Si le fauteuil roulant est équipé de freins à main, **VERROUILLEZ TOUJOURS LES DEUX FREINS À MAIN** avant un transfert vers et depuis le fauteuil roulant.

Blocage des roues/déblocage des roues

Pour bloquer les roues, abaissez les dispositifs de blocage des roues. Pour débloquer les roues, relevez les dispositifs de blocage des roues.

Garantie d'un an

Le fauteuil roulant comprend une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication, matériaux et main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pendant 1 an pour le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi une utilisation abusive, de la négligence, une manipulation brutale ou des dommages.

Expédiez le produit pré-affranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone : 1 866 517.2970

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %