
BIOS living

Fauteuil Roulant 18 PO/45 cm Mode D'emploi 56084

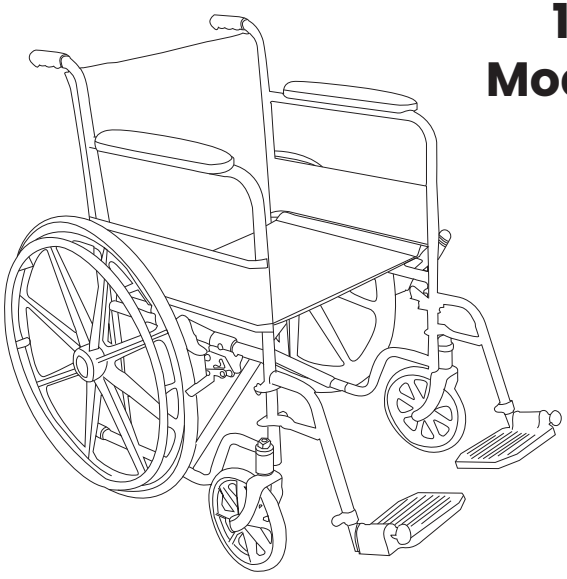


Nous vous remercions pour l'achat du fauteuil roulant BIOS Living. Veuillez lire le mode d'emploi avant de l'utiliser. **Il ne faut ni assembler ni utiliser cet équipement sans tout d'abord lire et comprendre ce mode d'emploi.**

Note : Les spécifications les plus récentes et les informations sur le produit ont été compilées dans le mode d'emploi au moment de la publication. Thermor Ltd se réserve le droit de faire des changements, lesquels peuvent causer de légères variations entre l'illustration et les explications fournies dans ce manuel et le produit acheté.

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur du siège : 18 po/46 cm
- Se plie facilement
- Roues avant de 8 po/20 cm
- Roues arrière de 24 po/61 cm en magnésium
- Double dispositif de blocage des roues arrière pour assurer des transferts sécuritaires
- Repose-pieds ajustables et amovibles
- Poignées confortables procurant une aisance et un contrôle accrus
- Pochette de rangement pratique
- Garniture de siège et dossier en nylon gaufré double tout-temps facile à nettoyer dans toutes les conditions météorologiques

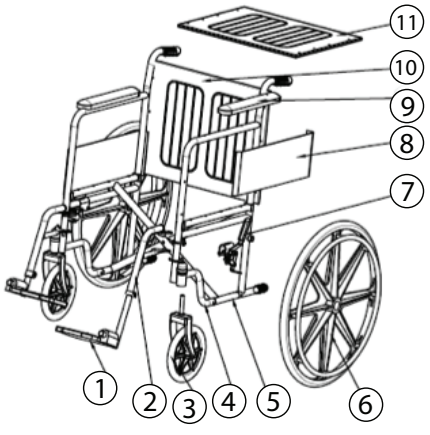

1. Repose-pieds
2. Potence métallique
3. Roues avant de 8 po/20 cm
4. Appui transversal
5. Barres d'appui latérales
6. Roues arrière de 24 po/ 61 cm en magnésium
7. Frein
8. Panneaux latéraux métalliques
9. Appuie-bras
10. Garniture de dossier en nylon gaufré double
11. Garniture de siège en nylon gaufré doublet

Assemblage


1. Déplier le fauteuil roulant.

Rabaissez les deux côtés du siège afin de déplier le fauteuil roulant pour une condition normale de fonctionnement.




2. Assembler les repose-pieds.

Assemblez les deux repose-pieds à l'extrémité avant du fauteuil roulant tel qu'illustré dans le schéma; puis bougez et tournez les repose-pieds gauche et droit en position normale de fonctionnement (face à l'avant).

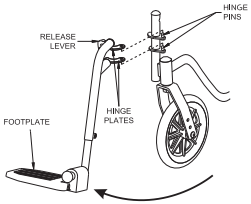

3. Plier le fauteuil roulant.

Pour plier le fauteuil roulant, tournez les repose-pieds en position verticale et levez le centre du siège.

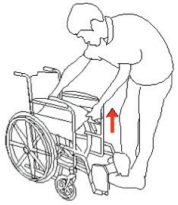

Mesures de sécurité

- La charge maximale du fauteuil roulant est de 300 lb/136 kg y compris le poids du conducteur/conductrice et tous les articles qu'il ou qu'elle peut transporter.
- Déplacez le fauteuil roulant sur une surface lisse; évitez tous les obstacles afin de prévenir le basculement du fauteuil roulant.
- **N'utilisez pas** le fauteuil roulant dans les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- Le fauteuil roulant **ne doit pas** servir de siège dans un véhicule motorisé sauf si le véhicule motorisé est pourvu d'un équipement homologué pour tenir et maintenir le fauteuil roulant.
- **Ne vous mettez pas** debout sur les repose-pieds car le fauteuil roulant pourrait basculer.

Entretien

- Avant d'utiliser le fauteuil roulant et durant le premier mois, vérifiez si les boulons sont desserrés. Serrez tous les boulons sur-le-champ.
- Lors d'une utilisation normale, faites une vérification à tous les trois mois afin de vous assurer que toutes les pièces soient en bonne condition.
- Vérifiez tous les écrous du fauteuil roulant (spécialement les écrous de serrage des axes des roues arrière). Ajustez-les promptement, au besoin. Les boulons de raccordement sur les barres transversales du fauteuil roulant sont conçus pour être lâches; aucun réglage n'est nécessaire.
- Vérifiez régulièrement les pièces mobiles et le mécanisme de direction du fauteuil roulant et appliquez un lubrifiant.
- Séchez le fauteuil rapidement s'il est mouillé.
- Essuyez régulièrement le fauteuil roulant avec un chiffon doux lors d'une utilisation normale et appliquez une cire pour le protéger de la rouille.

Garantie BIOS Living pour les fauteuils roulants Satisfaction garantie à 100 %.

Si, à tout moment, vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de ce produit, veuillez appeler BIOS Medical et parler à un représentant du service à la clientèle qui prendra les dispositions nécessaires pour que le produit soit testé ou remplacé à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre fauteuil roulant, appelez le **service à la clientèle de BIOS Medical au 1-800-387-8520.**

Garantie de trois ans : Les cadres sont garantis pendant 3 ans contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication pour les modèles suivants : Fauteuils roulants de la série Phoenix 56184, 56185, 56186 et fauteuils roulants de la série BIOS 56084.

Garantie d'un an : Les pièces et le rembourrage sont garantis un an contre les défauts de matériaux et de fabrication, à l'exclusion de l'usure normale.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une mauvaise utilisation, à une négligence de la part du propriétaire ou à l'usure normale.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Thermor Ltd ne garantit pas les pièces endommagées à la suite d'une installation incorrecte, d'une modification et/ou d'une mauvaise utilisation.

Thermor Ltd se réserve le droit de déterminer la meilleure méthode de réparation ou de remplacement. La pièce remplacée ne le sera qu'une seule fois dans le cadre de la garantie d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages. Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Email: support@biosmedical.com

Veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de téléphone et courriel. Thermor testera ou remplacera (au choix de Thermor) gratuitement toutes les pièces nécessaires pour corriger le défaut de matériel ou de fabrication.

Veuillez prévoir un délai de 10 jours pour l'expédition du retour.

Paper
Papier
BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %