BIOS℠ Diagnostics

Stéthoscope de cardiologie 508DI





Lire le mode d'emploi très attentivement avant d'utiliser le stéthoscope.

BIOS℠ Diagnostics

508DI Stéthoscope de cardiologie

Nous vous remercions pour l'achat du stéthoscope de cardiologie de BIOS Diagnostics[MC]. Veuillez lire le mode d'emploi très attentivement et de façon approfondie avant de l'utiliser.

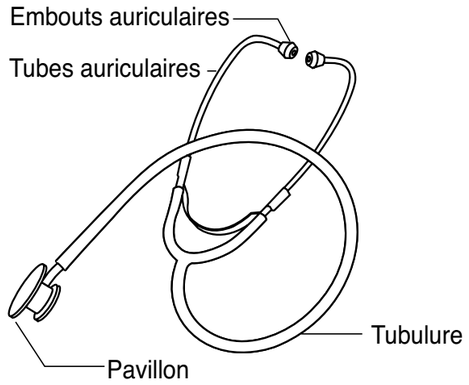


fig.1

Ce stéthoscope est doté d'un pavillon double afin de pouvoir entendre les sons de hautes et basses fréquences. Faites tout simplement pivoter le pavillon de 180°.

⚠Le pavillon du stéthoscope doit être placé sur la zone du corps désirée en maintenant seulement une pression raisonnable.

Assemblage et utilisation

1. Choisissez les embouts auriculaires qui vous conviennent. Le stéthoscope de cardiologie est doté d'embouts auriculaires offrant une étanchéité maximale et un ajustement confortable. Les embouts confortables de taille universelle sont conçus pour s'adapter précisément au canal auditif de façon à bloquer les bruits ambiants. Les embouts auriculaires sont vissés sur les tubes auriculaires, assurant ainsi une fixation solide.
   Note : Différentes tailles d'embouts auriculaires sont incluses. Retirez simplement les embouts auriculaires du stéthoscope et fixez les embouts d'une taille plus adéquate.
2. Pour ajuster l'angle des tubes auriculaires, tenez la tubulure dans une main et faites pivoter chaque tube auriculaire dans l'angle désiré (voir la figure 2).
3. Pour réduire la force de ressort, saisissez chaque tube auriculaire à l'endroit de sa courbure et tirez délicatement vers l'extérieur (voir la figure 3).
4. Pour augmenter la force de ressort, croisez les tubes auriculaires (voir la figure 4).
5. Lorsque les embouts auriculaires sont dans vos oreilles, les tubes auriculaires doivent être pointés vers l'avant (voir la figure 5). Si le stéthoscope est porté de façon inappropriée, la qualité des sons peut être atténuée et l'acoustique peut être complètement bloquée dans certains cas.
6. Seul un côté du pavillon double fonctionne à la fois. Vous devez ouvrir ou fermer la cloche ou la membrane en faisant pivoter le pavillon. Si la membrane est ouverte, la cloche sera fermée empêchant les sons de passer à travers celle-ci.

⚠ Dans le canal auditif, assurez-vous que les embouts auriculaires soient pointés légèrement vers l'arrière.

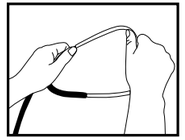


fig.2

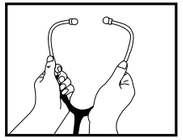


fig.3

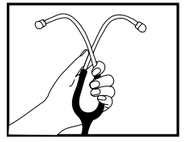


fig.4



fig.5

Nettoyage

En vue d'éviter une accumulation de saleté et de poussière, veuillez toujours ranger le stéthoscope dans son emballage. La surface extérieure de l'instrument peut être nettoyée avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Pour la désinfection, le stéthoscope peut être nettoyé avec un chiffon humidifié d'alcool.

⚠ Ne pas utiliser la stérilisation thermique ou le trempage.

Avertissement

Ne jamais mettre en contact le stéthoscope avec un liquide et vous assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier. Puisque le stéthoscope n'est pas conçu pour des interventions chirurgicales, un simple nettoyage et/ou une désinfection avec un désinfectant de surface à base d'alcool sont suffisants.
⚠ Ne jamais utiliser un produit de nettoyage et de récurage!

Garantie de 5 ans

Le stéthoscope de cardiologie comprend une garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normale par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Ligne d'assistance BIOS Medical : 1-866-536-2289

FSC www.fsc.org FPO

Paper Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

V. C