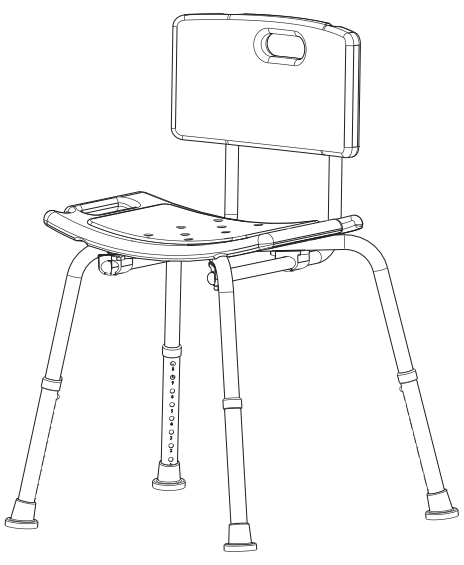
BIOS living™

59001
SIÈGE DE BAIN AJUSTABLE avec dossier



Nous vous remercions pour l'achat du siège de bain ajustable avec dossier de BIOS Living[MC]. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter d'installer votre siège de bain.

ATTENTION

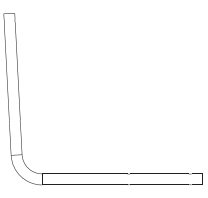
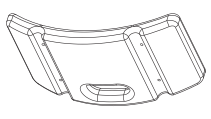
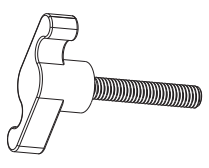
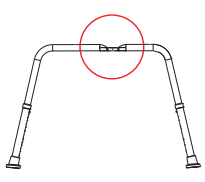
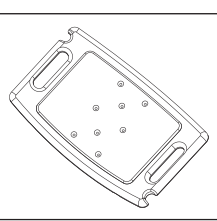
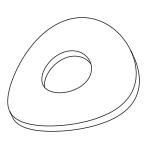
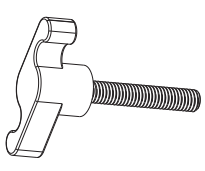
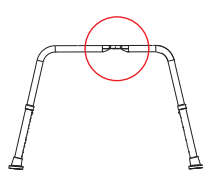
S'assurer que le siège soit correctement et sécuritairement verrouillé en place avant de l'utiliser.

Veillez à serrer les vis avant chaque utilisation et vérifiez que la hauteur des quatre pattes est la même en s'assurant que les goupilles à blocage automatique sont enclenchées dans les mêmes réceptacles numérotés.

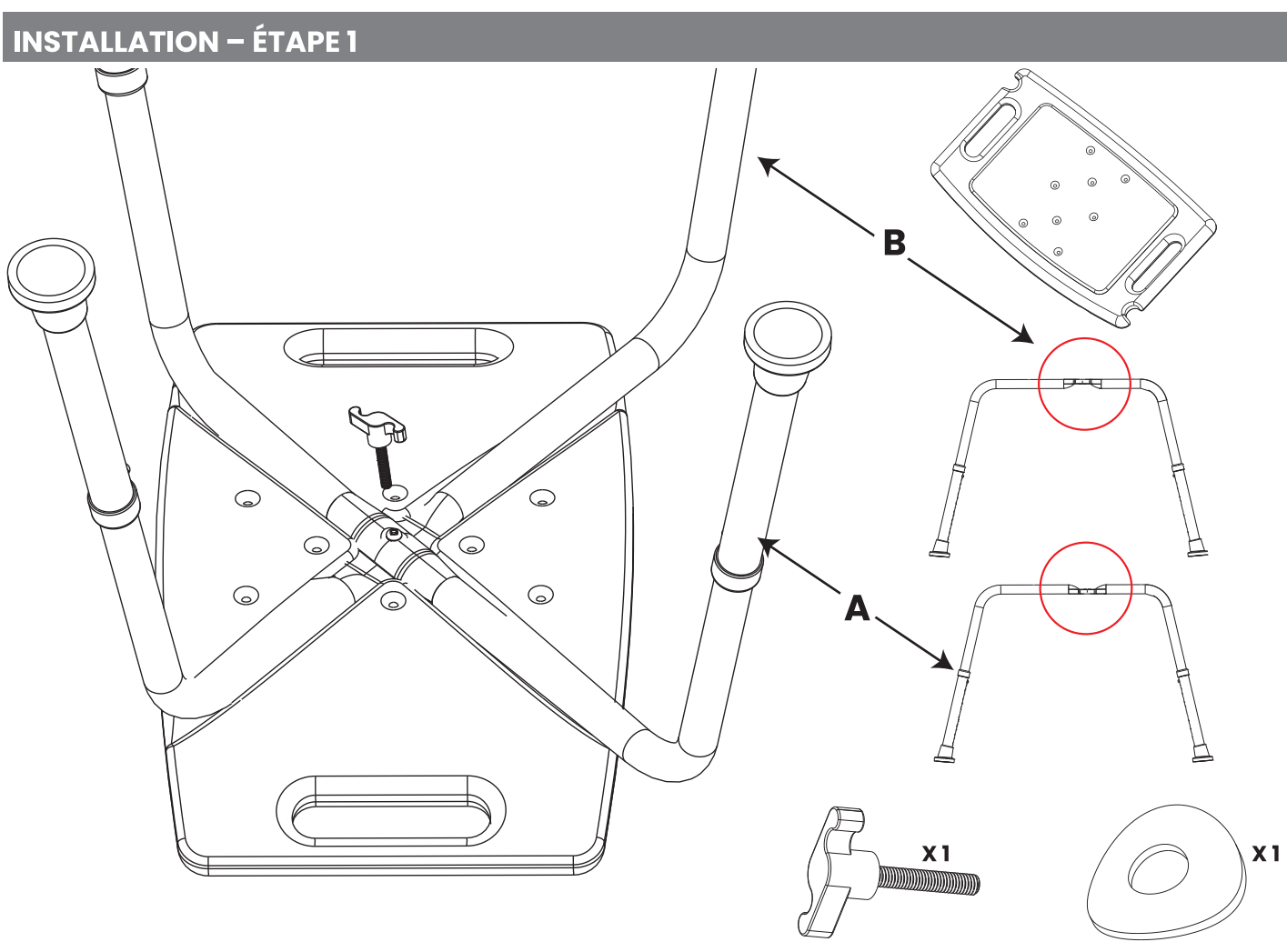
- **Ne pas** tenter d'assembler le siège de bain BIOS Living[MC] au-delà de votre capacité physique et/ou sans assistance.
- Consulter votre fournisseur de soins de santé pour déterminer la pertinence du dispositif pour un utilisateur particulier.
- **Ne pas** excéder le poids maximal de 136 kg (300 lb), car des blessures pourraient en résulter.
- Le siège de bain BIOS Living[MC] n'est pas adapté pour être utilisé en tant que marchepied.

Remarque : Les spécifications les plus récentes et les informations sur le produit ont été compilées dans le manuel du propriétaire au moment de la publication. Thermor Ltd. se réserve le droit de faire des changements, lesquels peuvent causer de légères variations entre l'illustration et les explications fournies dans ce mode d'emploi et le produit acheté.

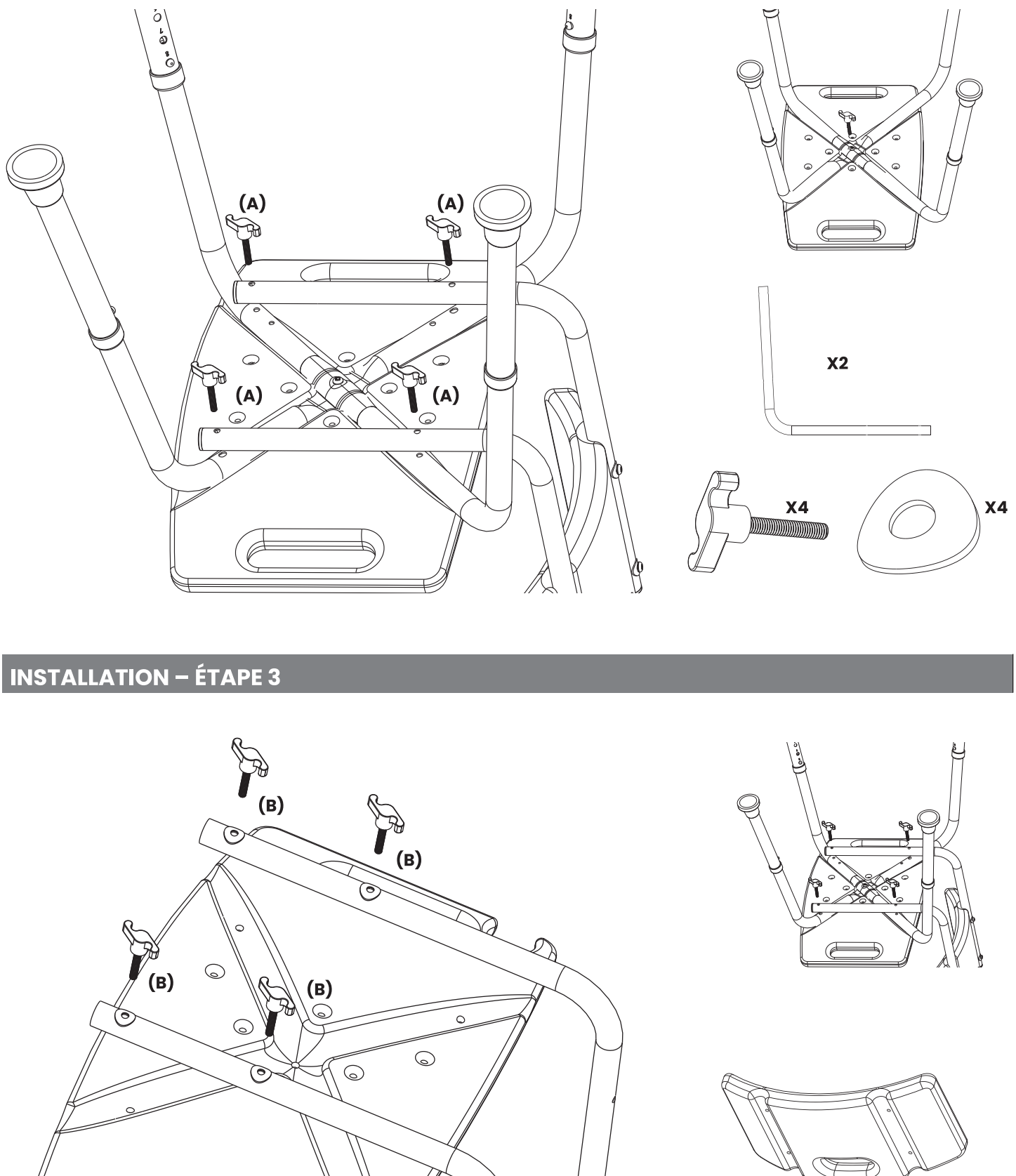
VÉRIFICATION DES PIÈCES

	2 tubes de dossier		1 dossier en plastique		4 boutons (55 mm) **(A)**
	1 tube d'armature **(A)**		1 siège en plastique		9 joints recourbés
	5 boutons (35 mm) **(B)**		1 tube d'armature **(B)**		

INSTALLATION – ÉTAPE 1



INSTALLATION – ÉTAPE 2



INSTALLATION – ÉTAPE 3

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Le siège de bain ajustable avec dossier de BIOS Living[MC] comporte une garantie limitée à vie contre les vices de matériaux et de main-d'œuvre lors d'une utilisation normale par le propriétaire original. Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport/expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, de la négligence, une manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

FSC www.fsc.org FPO

Paper Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %