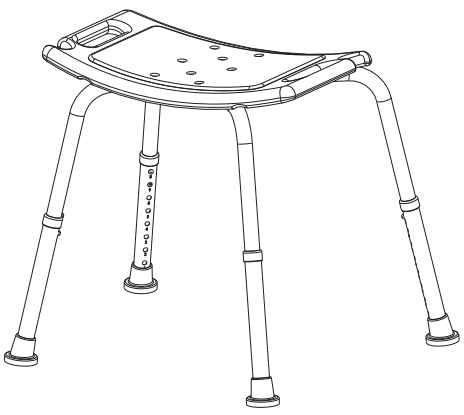
BIOS living™

59002
SIÈGE DE BAIGNOIRE RÉGLABLE



Nous vous remercions de votre achat du siège de baignoire ajustable de BIOS Living[MC]. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'assemblage de votre siège de baignoire.

Mise en garde

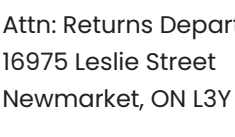
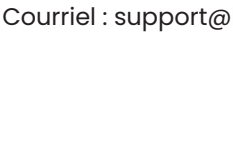
Assurez-vous que le siège est correctement et solidement verrouillé en place avant de l'utiliser.

Veillez à serrer les vis avant chaque utilisation et vérifiez que la hauteur des quatre pattes est la même en s'assurant que les goupilles à blocage automatique sont enclenchées dans les mêmes réceptacles numérotés.

- **Ne pas** tenter d'assembler le siège de baignoire BIOS Living[MC] au-delà de votre capacité physique et/ou sans aide.
- Consulter votre professionnel de la santé pour déterminer la pertinence du siège de baignoire pour un utilisateur particulier.
- **Ne pas** excéder la limite de poids maximale de 136 kg (300 lb), car des blessures pourraient en résulter.
- Le siège de baignoire n'est pas approprié pour être utilisé comme marchepied.

Remarque : Le mode d'emploi a été préparé à partir des spécifications les plus récentes et des informations sur le produit disponibles au moment de la publication. BIOS Medical se réserve le droit de faire des changements, lesquels pourraient présenter de légères variations entre l'illustration et les explications dans ce mode d'emploi et le produit acheté.

1. VÉRIFIER TOUTES LES PIÈCES

	1 siège en plastique		1 tube d'armature **(A)**		1 tube d'armature **(B)**
	5 boutons (35 mm) **(C)**		9 joints recourbés		

2. INSTALLATION

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Le siège de bain ajustable de BIOS Living[MC] comporte une garantie limitée à vie contre les vices de matériaux et de main-d'œuvre lors d'une utilisation normale par le propriétaire original. Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport/expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, de la négligence, une manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

FSC www.fsc.org FPO

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %