BIOS living™

Tabouret de douche réglable 59005


Merci d'avoir acheté le tabouret de douche réglable BIOS Living[MC]. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de tenter d'installer votre tabouret de douche.

⚠ **AVERTISSEMENT**


Assurez-vous que le tabouret est assemblé correctement, que les boulons sont bien serrés et que le tabouret est placé sur une surface plane en toute sécurité avant de l'utiliser.

- **Ne tentez pas** d'assembler le tabouret de douche réglable BIOS Living[MC] si cette tâche est au-delà de vos capacités physiques et/ou sans assistance.
- Consultez votre fournisseur de soins de santé pour déterminer la pertinence de l'utilisation du tabouret pour l'utilisateur.
- **Ne dépassez pas** la limite de poids maximale de 136 kg/300 lb, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Le tabouret de douche ajustable BIOS Living[MC] ne convient pas comme marchepied.


ÉTAPE 1 : VÉRIFICATION DE TOUTES LES PIÈCES

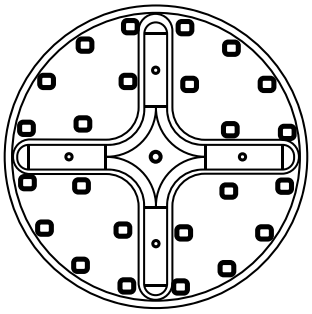


1 siège en plastique

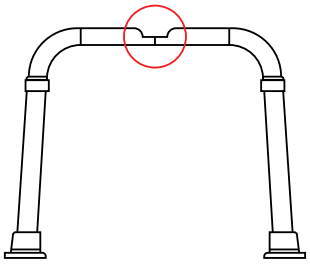


1 tube de cadre A

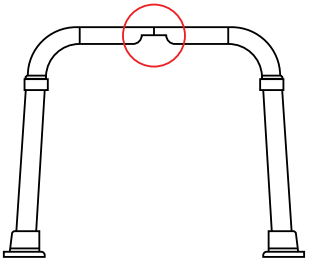

1 tube de cadre B

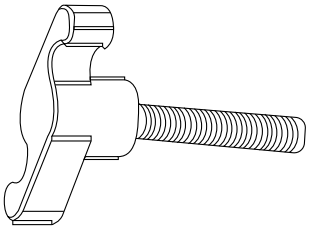


5 boutons

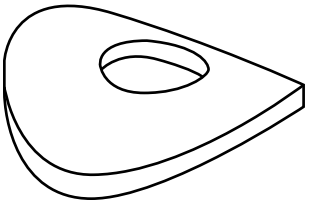


5 joints

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE

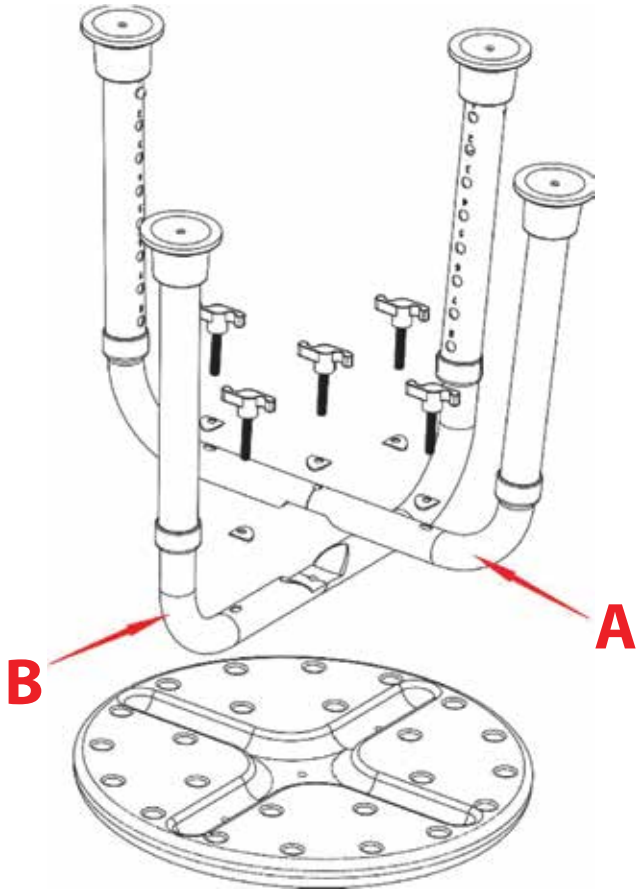

ÉTAPE 3 : AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

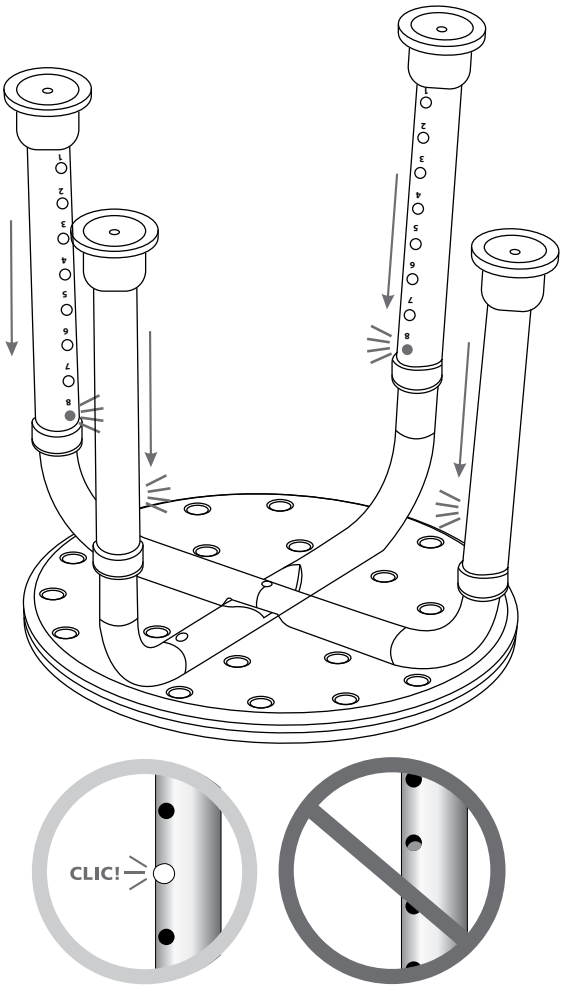

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le tabouret de baignoire et de douche BIOS Living[MC] comprend une garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à la manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit prépayé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone : 1.866.517.2970

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %