BIOS living™

CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTE
MODE D'EMPLOI
LF759

- Cadre en aluminium léger fournit un structure de soutien stable
- Appuie-bras profilés procurent confort et sécurité
- Hauteur réglable : 28 po à 32 po/71 cm à 81 cm
- Largeur réglable : 18 po à 25 po/46 cm à 64 cm
- Capacité pondérale : 300 lb/136 kg

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

Étape 1. Retirer le siège de toilette.
Tout d'abord, enlever les verrous du siège de toilette.

Étape 2. Aligner le support de fixation avec les trous des boulons du siège de toilette. **(Figure 1)**

Étape 3. Placer le siège de toilette sur le dessus du support de fixation et aligner les trous.

Étape 4. Installer les boulons et les serrer solidement.

Étape 5. a) Glisser les tubes des appuie-bras dans le support de fixation et les fixer en place à l'aide des boutons-poussoirs. **(Figure 2)**

b) Assembler le cadre de sécurité en insérant le tube court dans le tube des bras, en le glissant dans les appuie-bras et en fixant le tout en place à l'aide de l'agrafe E. **(Figure 2)**

Étape 6. Régler le cadre de sécurité à la taille désirée à l'aide des boutons-poussoirs. Veiller à ce que tous les boutons soient bien fixés en place avant d'utiliser le produit. **(Figure 3)**

Figure 1

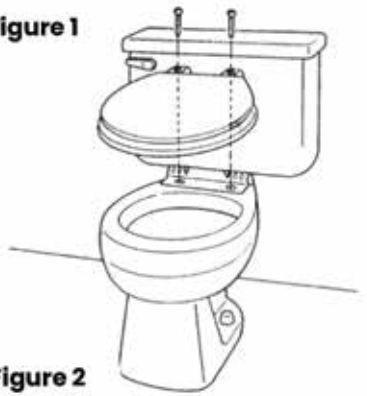


Figure 2


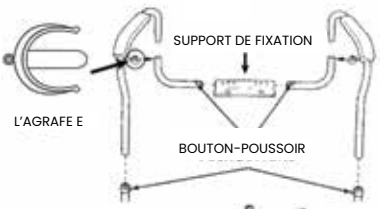


Figure 3

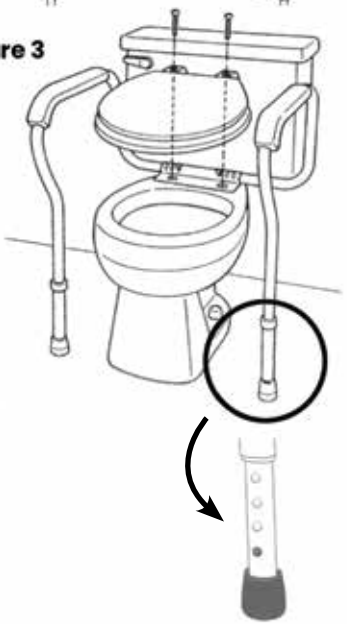

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Le cadre de sécurité pour toilette comprend une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retourner le produit avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone : 1.866.517.2970

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %
V. D

Paper
Papier