BIOS living

LF775 et LF776
Siège de toilette surélevé articulé

UTILISATION PRÉVUE


Un siège de toilette surélevé accroit l'indépendance de l'utilisateur en ajoutant de la hauteur à la plupart des toilettes. En facilitant le processus de s'asseoir et de se lever de la toilette, le siège de toilette surélevé offre confort et soutien. La particularité d'un siège de toilette surélevé articulé est qu'il vous permet de le soulever pour faciliter le nettoyage.

REMARQUE : Ce produit a été conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes. Assurez-vous que le siège est correctement installé, qu'il s'adapte bien et qu'il est stable avant de l'utiliser.

ENTRETIEN : Nous recommandons d'utiliser de l'eau et du savon doux ou des lingettes antibactériennes pour le nettoyage.

Outils nécessaires : tournevis plat et clé

CONTENU

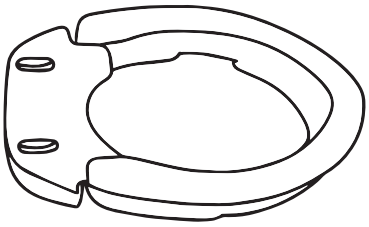

1 Siège de toilette surélevé articulé



2 boulons



4 rondelles en métal



4 rondelles en plastique



2 écrous

(Voir l'image A pour les étapes 1 à 4)

1. Retirez le siège de votre toilette.
2. Positionnez le siège de toilette surélevé articulé sur votre toilette.
3. Placez le siège de votre toilette au-dessus du siège surélevé.
4. Alignez les trous avec la toilette. Glissez les rondelles métalliques sur les boulons, puis faites passer les boulons dans les trous du siège, du siège surélevé et de la toilette.

(Voir l'image B pour les étapes 5 à 8)

5. Dessous la toilette, placez les rondelles en plastique et vissez les écrous à la main.
6. Finissez de serrer les écrous en utilisant une clé pour retenir les écrous et un tournevis plat pour serrer les boulons.
7. Serrez les deux côtés jusqu'à ce que l'installation soit stable.
8. Vérifiez le siège ainsi que le siège surélevé de façon fréquente avant l'usage afin de vous assurer que l'installation soit bien stable. Serrez les boulons au besoin.

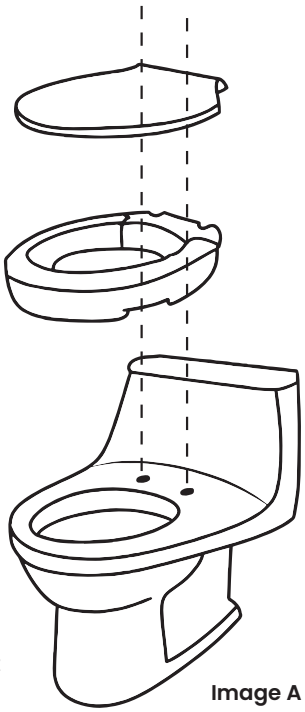


Image A

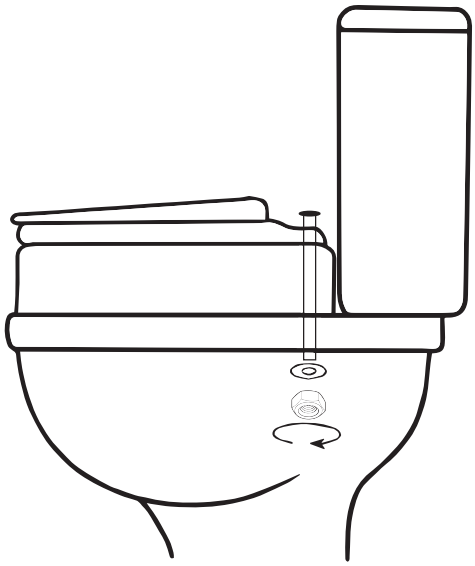


Image B

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le siège de toilette surélevé articulé de Bios Living comprend une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pour le premier propriétaire. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

Paper
Papier

FSC
www.fsc.org
FPO

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM