BIOS Diagnostics

Stéthoscope à tête double de qualité supérieure 509DI et 510DI



Lisez les instructions attentivement avant d'utiliser le stéthoscope

BIOS Diagnostics

Stéthoscope à tête double de qualité supérieure 509DI et 510DI

Nous vous remercions d'avoir acheté le stéthoscope à tête double de qualité supérieure de BIOS Diagnostics[MC]. Veuillez lire complètement et attentivement ce mode d'emploi avant de tenter d'utiliser ce produit.

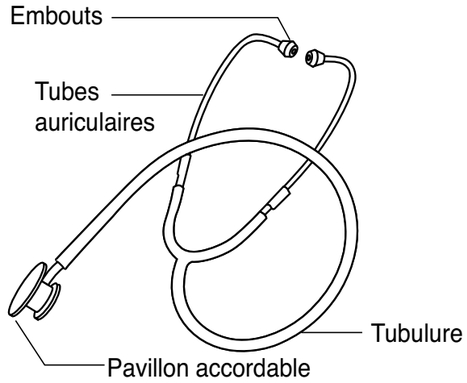


Figure 1

Ce stéthoscope est muni d'une tête double qui permet d'écouter les basses fréquences ainsi que les hautes fréquences. Tournez tout simplement le pavillon de 180°.

⚠ Le stéthoscope doit être placé sur la zone du corps souhaitée en exerçant une pression raisonnable.

Assemblage et utilisation

1. Pour assurer une étanchéité acoustique maximale et un port confortable, le stéthoscope à deux têtes est équipé d'embouts d'étanchéité de confort. Les embouts d'étanchéité sont de taille universelle et ils sont conçus pour s'adapter aux conduits auditifs afin de bloquer le bruit ambiant. Les embouts sont bien ajustés sur les extrémités pour assurer une fixation sûre.

2. Pour régler l'angle d'un tube auriculaire, tenez-le d'une main et tournez-le pour obtenir l'angle approprié (voir la figure 2). Répétez avec l'autre tube auriculaire.

3. Pour réduire la tension des tubes auriculaires, saisissez chaque tube au niveau de sa courbure et tirez doucement vers l'extérieur (voir la figure 3).

4. Pour augmenter la tension, serrez les tubes auriculaires (voir la figure 4).

5. Lorsque les embouts sont dans vos oreilles, les tubes auriculaires doivent être orientés vers l'avant (voir la figure 5). Le port incorrect du casque d'écoute du stéthoscope peut entraîner une mauvaise étanchéité acoustique et, dans certains cas, un blocage complet du son.

6. Un seul côté du stéthoscope à double tête fonctionne à la fois. Vous devez ouvrir ou fermer la membrane en tournant le pavillon. Si la membrane est ouverte, le pavillon sera fermé, ce qui préviendra la pénétration du son par le pavillon, et vice versa.

⚠ Assurez-vous que les embouts sont légèrement dirigés vers l'avant dans le conduit auditif.

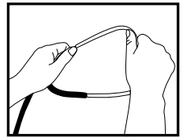


Figure 2

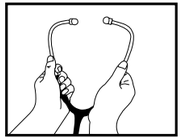


Figure 3

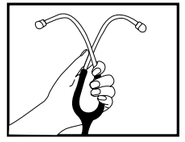


Figure 4



Figure 5

Nettoyage

Rangez toujours le stéthoscope dans son emballage afin de prévenir l'accumulation de saletés et de poussières. La surface extérieure de l'instrument peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Le stéthoscope peut être désinfecté à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'alcool.

⚠ Ne pas utiliser la stérilisation thermique ou le trempage.

Avertissement

Ne mettez jamais le stéthoscope en contact avec un liquide et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier! Puisque ce stéthoscope n'a pas été conçu pour l'utilisation lors d'interventions chirurgicales, le simple nettoyage et/ou la désinfection à l'aide d'un désinfectant de surface à base d'alcool sont suffisants.

⚠ N'utilisez pas de produits de récurage pour nettoyer le stéthoscope!

Garantie de 5 ans

Le stéthoscope à tête double de qualité supérieure de BIOS Diagnostics[MC] est garanti 5 ans contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Ligne d'assistance BIOS Medical : 1-866-536-2289

FSC www.fsc.org FPO

Paper Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

V. B