BIOS living™

⚠ AVERTISSEMENT ⚠
À LIRE AVANT UTILISATION
NE PAS DÉTRUIRE

Mode d'emploi
Coussin chauffant lesté
N° de modèle : **PM066**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le coussin chauffant lesté BIOS Living[MC].
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance en indiquant le numéro de modèle de votre produit.

COMPREND :

1 coussin chauffant
1 mode d'emploi
1 commande

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	PM066
Nom	Coussin chauffant lesté
Tension d'entrée	120 V CA/60 Hz
Puissance nominale	135 W
Niveaux de chaleur	6 niveaux (1, 2, 3, 4, 5 et 6)
Réglages automatiques	4 réglages (0,5; 1; 1,5; 2)
Dimensions	17 po x 33 po (43 cm x 84 cm)

LISTE DES SYMBOLES			
	Lire toutes les instructions		Lever au cycle délicat avec l'eau à 30 °C
	**NE PAS** percer		**NE PAS** utiliser de javellisant
	**NE PAS** utiliser s'il est plié ou froissé		**NE PAS** repasser
	Jeter l'emballage de manière écologique		**NE PAS** nettoyer à sec
	Jeter l'emballage de manière écologique		
	**AVERTISSEMENT :** Risques de blessures ou dangers pour la santé.		
	**ATTENTION :** Informations relatives à la sécurité et aux risques d'endommagement du coussin/des accessoires.		

1. IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
2. **NE PAS** UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
3. **NE PAS** UTILISER SUR UN NOURRISSON.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UNE PERSONNE ENDORMIE OU INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT SOIGNEUSEMENT SURVEILLÉE.
5. **NE PAS** UTILISER SUR LES ZONES DE PEAU INSENSIBLE.
6. TOUJOURS VÉRIFIER QUE LE COUSSIN CHAUFFANT EST COMPLET, S'IL EST ENDOMMAGÉ, **NE PAS** UTILISER, CAR DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE.
7. **NE PAS** UTILISER D'ÉPINGLES OU D'AUTRES MOYENS MÉTALLIQUES POUR FIXER CE COUSSIN EN PLACE.
8. **NE PAS** S'ASSEOIR SUR LE COUSSIN OU L'ÉCRASER. ÉVITER LES PLIS SERRÉS.
9. NE JAMAIS TIRER CE COUSSIN PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.
10. **NE PAS** UTILISER LE CORDON COMME POIGNÉE.
11. EXAMINER SOIGNEUSEMENT LA HOUSSE AVANT CHAQUE UTILISATION. JETER LE COUSSIN SI LA HOUSSE PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION.
12. ENROULER LE CORDON SANS LE SERRER LORS DU RANGEMENT, UN ENROULEMENT SERRÉ RISQUE D'ENDOMMAGER LE CORDON ET LES PIÈCES INTERNES.
13. CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT SUR UNE PRISE DE COURANT STANDARD DE 120 V.
14. NE JAMAIS LAISSER CET APPAREIL BRANCHÉ SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

15. LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, CE COUSSIN DOIT ÊTRE CONSERVÉ DANS UN ENDROIT FRAIS, SOMBRE ET SEC – PRÉFÉRABLEMENT DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE.
16. CE COUSSIN CHAUFFANT EST ÉQUIPÉ D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE BROCHE EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) PAR MESURE DE SÉCURITÉ. CETTE FICHE NE S'INSÈRE QUE DANS UN SEUL SENS DANS UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE NE S'INSÈRE TOUJOURS PAS, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS TENTER DE NEUTRALISER CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.
17. LE PRODUIT EST CONÇU UNIQUEMENT POUR RÉCHAUFFER LE CORPS HUMAIN.
18. **NE PAS** UTILISER SUR UN ANIMAL.
19. **NE PAS** UTILISER SUR DES PERSONNES SENSIBLES À LA CHALEUR OU SUR DES PERSONNES VUL NÉRABLES INCAPABLES DE RÉAGIR À UNE SURCHAUFFE.
20. CE PRODUIT NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR DES JEUNES ENFANTS DE 3 ANS OU MOINS.
21. CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES ENFANTS (3 ANS ET PLUS) QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'ADULTES ET S'ILS ONT REÇU DES INSTRUCTIONS ADÉQUATES SUR LA MANIÈRE DE L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ.
22. LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES OU SENSORIELLES RÉDUITES OU MANQUANT D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCES DEVRAIENT ÊTRE SUPERVISÉES ET AVOIR REÇU DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ, EN ÉTANT PLEINEMENT CONSCIENTES DES RISQUES QUI EN DÉCOULENT.
23. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE PRODUIT.
24. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
25. LE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UN USAGE MÉDICAL DANS LES HÔPITAUX.
26. **NE PAS** PERFORER.
27. **NE PAS** UTILISER LE COUSSIN S'IL EST PLIÉ OU FROISSÉ.
28. **NE PAS** UTILISER LE COUSSIN S'IL EST MOUILLÉ.
29. LE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LA COMMANDE SPÉCIFIÉE.
30. LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES ÉMIS PAR LE PRODUIT PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES FONCTIONS DES APPAREILS MÉDICAUX, TELS QUE LES STIMULATEURS CARDIAQUES. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER LE COUSSIN SI VOUS ÊTES ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF MÉDICAL.
31. **NE PAS** TIRER, TOURNER OU PLIER LE CORDON D'ALIMENTATION.
32. EXAMINER RÉGULIÈREMENT LE PRODUIT POUR VÉRIFIER S'IL EST ENDOMMAGÉ OU S'IL PRÉSENTE DES SIGNES D'USURE. SI DE TELS SIGNES SONT APPARENTS, SI L'APPAREIL A ÉTÉ UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE OU S'IL NE CHAUFFE PLUS, IL DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ PAR LE FABRICANT AVANT D'ÊTRE REMIS EN MARCHE. IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.
33. SI LE CORDON D'ALIMENTATION PRINCIPAL EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE MIS AU REBUT; SI LE CORDON NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉ DU PRODUIT, LE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS AU REBUT AVEC LE CORDON.
34. LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE LA COMMANDE S'ÉCHAUFFENT LORSQUE LE COUSSIN EST UTILISÉ. POUR CETTE RAISON, LA COMMANDE NE DOIT JAMAIS ÊTRE COUVERTE LORSQUE LE COUSSIN EST UTILISÉ.
35. **NE PAS** UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ LA TENEUR EN OXYGÈNE EST ÉLEVÉE.
36. DÉBRANCHER LE COUSSIN LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET NE JAMAIS LE LAISSER SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST UTILISÉ, SPÉCIALEMENT EN PRÉSENCE D'UN ENFANT.
37. UTILISER LE COUSSIN UNIQUEMENT À LA TENSION NOMINALE INDIQUÉE SUR LE PRODUIT. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS UTILISER DES GÉNÉRATEURS ET DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE.
38. SI LE PRODUIT EST MUNI D'UNE FERMETURE MAGNÉTIQUE, NE PAS L'UTILISER SI VOUS AVEZ UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D'AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX SENSIBLES AUX AIMANTS.
39. POUR UN USAGE À LA MAISON UNIQUEMENT.
40. LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX APPAREILS LAVABLES ÉQUIPÉS D'UN CORDON NON DÉTACHABLE DOIVENT INDIQUER QUE L'INTERRUPTEUR OU LA COMMANDE NE DOIT PAS ÊTRE MOUILLÉ PENDANT LE LAVAGE ET QUE, PENDANT LE SÉCHAGE, LE CORDON DOIT ÊTRE PLACÉ DE MANIÈRE QUE L'EAU NE COULE PAS DANS L'INTERRUPTEUR OU LA COMMANDE.
41. LORSQUE LE COUSSIN EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE UTILISÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, LE NIVEAU DE CHALEUR DOIT ÊTRE RÉGLÉ AU PLUS BAS POUR UNE UTILISATION CONTINUE.
42. LAISSER LE COUSSIN REFROIDIR AVANT DE LE RANGER.
43. **NE PAS** FROISSER LE COUSSIN EN PLAÇANT DES OBJETS DESSUS LORSQU'IL EST RANGÉ.

44. LES INSTRUCTIONS POUR LE COUSSIN CHAUFFANT DOIVENT FAIRE MENTION DE CECI : LE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR UN LIT RÉGLABLE, SI C'EST LE CAS, IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER QUE LE CORDON OU LE COUSSIN LUI-MÊME **NE SE COINCE PAS** DANS LES CHARNIÈRES, PAR EXEMPLE.
45. LE COUSSIN CHAUFFANT LESTÉ NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LA COMMANDE SPÉCIFIÉE.

ÉLIMINATION APPROPRIÉE




Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, le produit doit être recyclé de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre coussin chauffant usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Problème	Cause	Solution
Le coussin chauffant ne dégage pas assez de chaleur ou ne fonctionne pas.	Les produits chauffants fournissent une chaleur sûre et protègent la peau des consommateurs dans une plage de température basée sur les normes de sécurité internationales, ce qui permet d'éviter les brûlures à basse température. Par conséquent, le réglage de la température consiste à garder la chaleur plutôt qu'à chauffer.	Si vous ne sentez pas de chaleur, vous pouvez plier le produit et le tester pendant 30 minutes pour voir s'il fonctionne ou non (le coussin doit être placé à plat, sans être plié pour une utilisation normale). Si vous ne sentez toujours pas de chaleur après le test, veuillez contacter notre service à la clientèle.
Le produit ne fonctionne pas à l'arrivée.	Le produit présente des dysfonctionnements.	À la réception du produit, sortir le coussin de son emballage et le placer à plat (ne pas le plier). Vérifier que le coupleur et la prise principale sont correctement branchés, puis allumer l'appareil pour vérifier s'il fonctionne normalement ou non. Si le produit ne fonctionne pas normalement, veuillez contacter notre service à la clientèle.
La chaleur n'est pas uniforme.	Le produit est plié ou le fil chauffant est enroulé pendant l'utilisation.	Placer le coussin chauffant à plat pendant l'utilisation. La température des parties du corps qui sont en contact avec les zones chauffantes est plus élevée que celle des zones qui ne le sont pas, ce qui est un phénomène normal.
Le produit ne fonctionne plus après avoir été utilisé pendant un certain temps.	Le produit n'est pas utilisé ou lavé correctement	Contacter le service à la clientèle.

Si les suggestions ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le(s) problème(s), cela peut être le résultat de la protection permanente contre l'extinction par le système de sécurité. Dans ce cas, veuillez contacter notre service à la clientèle au **1 800 387-8520**.

2. PANNEAU DE CONTRÔLE

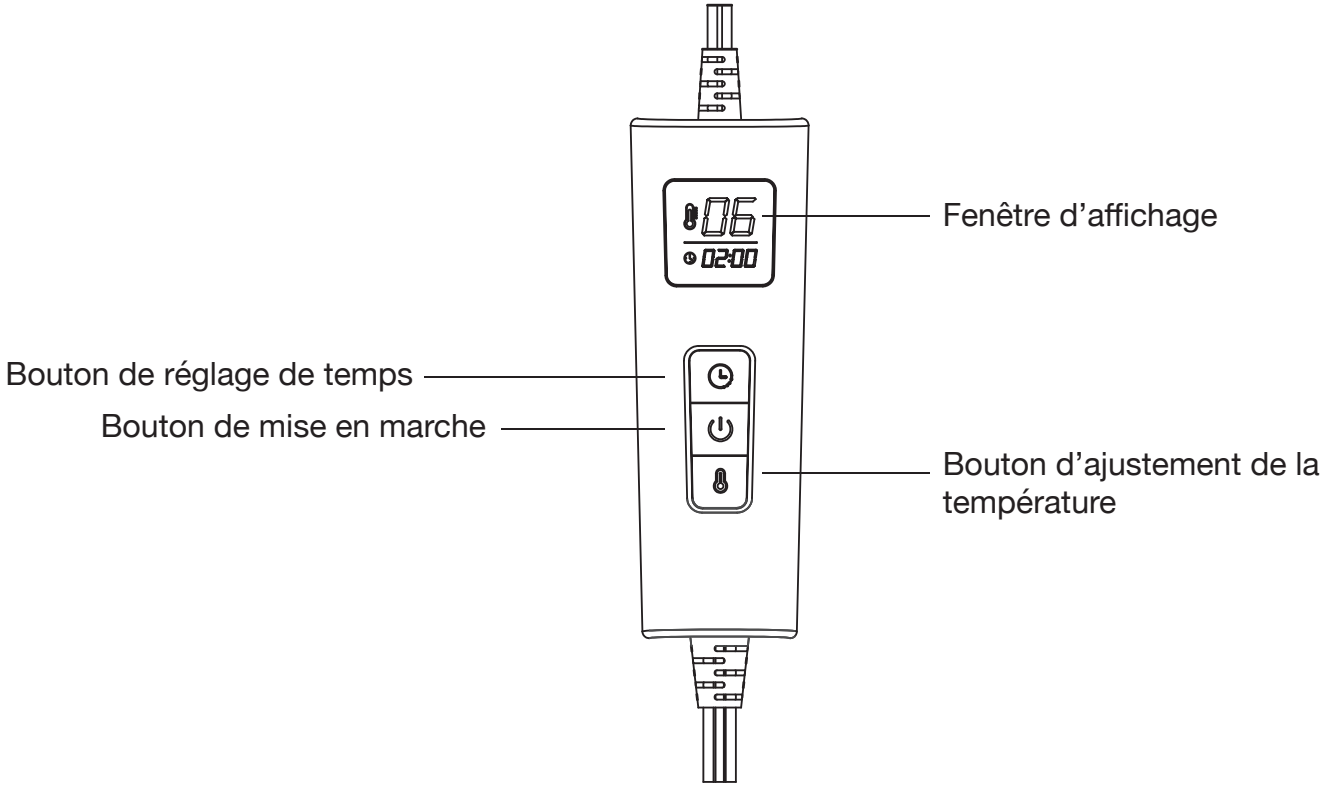

GUIDE D'UTILISATION

1. Brancher le produit dans une prise électrique et appuyer sur le bouton de mise en marche. Le niveau de température 1 sera activé par défaut et s'affichera à l'écran.
2. Appuyer sur le bouton de réglage de la température pour choisir le niveau de température de 1 à 6 qui s'affichera à l'écran.
3. Le coussin chauffant s'éteint automatiquement après 2 heures d'utilisation régulière.
4. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour éteindre le produit et le débrancher de la prise électrique.

3. SOIN ET ENTRETIEN

1. Avant de le nettoyer, débrancher le coussin de la prise électrique.
2. Débranchez la commande du produit.

NETTOYAGE

1. Faire tremper le produit pendant 15 minutes dans du savon doux et de l'eau froide.
2. Laver à la machine au cycle délicat dans de l'eau à 30°C pendant 5 minutes ou laver à la main.
3. Rincer à l'eau fraîche.
4. Sécher à l'air libre uniquement. **NE PAS** sécher à la sécheuse.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

NE PAS NETTOYER À SEC.
NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.
NE PAS ESSORER.
NE PAS REPASSER VOTRE COUSSIN CHAUFFANT.

1. Débranchez le cordon du coussin en tirant fermement sur le connecteur. **NE PAS** tirer sur le cordon.
2. Laver le coussin à la machine à l'eau froide au cycle délicat ou à la main. Sécher à l'air libre ou suspendu uniquement. **NE PAS** sécher à la sécheuse.
3. **NE PAS** brancher le coussin et le connecteur du coussin avant qu'ils ne soient complètement secs.

ENTRETIEN

1. Ranger le coussin lorsqu'il est entièrement refroidi et sec.
2. Rouler le cordon sans le serrer.
3. Ranger dans un environnement aéré et sec.

4. ATTENTION

- **NE PAS** IMMERGER LA COMMANDE DANS L'EAU. LA COMMANDE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EN CONTACT DIRECT AVEC DE L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES. NETTOYER LA COMMANDE AVEC UN CHIFFON SEC ET NON PELUCHEUX.
- **NE PAS** NETTOYER À SEC, CAR LES SOLVANTS DE NETTOYAGE À SEC PEUVENT ENDOMMAGER LES FILS.
- **NE PAS** NETTOYER CHIMIQUEMENT (AVEC DE L'EAU DE JAVEL OU DES LIQUIDES DE NETTOYAGE).
- N**NE PAS** ESSORER.
- **NE PAS** UTILISER DE PINCES À LINGE.
- **NE PAS** REPASSER NI ESSORER.
- **NE PAS** UTILISER DE BOULES DE NAPHTALINE OU DE VAPORISATEURS D'AUCUNE SORTE.
- **NE PAS** REBRANCHER OU UTILISER AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT SEC.
- **NE PAS** LAVER LE CORDON NI LE METTRE DANS L'EAU.
- VEUILLEZ NOTER QUE LES LAVAGES FRÉQUENTS ONT UN EFFET NÉGATIF.

RANGEMENT : Débrancher la commande si le coussin n'est pas utilisé pendant une longue période.
Il est recommandé de le conserver dans son emballage d'origine.

AVERTISSEMENT : Le coussin doit être complètement refroidi avant d'être plié, sinon il risque de s'abîmer.
Ne pas placer d'objets sur le produit plié lorsqu'il est rangé.

ÉLIMINATION : Pour des raisons de respect de l'environnement, le coussin doit être éliminé séparément au lieu d'être jeté comme déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie. Veuillez vous en débarrasser de façon appropriée dans le centre de collecte des déchets local.

GARANTIE D'UN AN

Le coussin chauffant lesté de BIOS Living[MC] comprend une garantie d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par son propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retourner le produit avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Email: support@biosmedical.com

C ETL US LISTED
Intertek
5027022
CONFORMS TO
UL STD. 130
CERTIFIED TO
CSA STD. C22.2 NO15

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %