BIOS living™

⚠ AVERTISSEMENT ⚠
À LIRE AVANT UTILISATION.
NE PAS DÉTRUIRE.

Mode d'emploi
Coussin chauffant pour les épaules et le dos
N° de modèle : **PM067**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le coussin chauffant pour les épaules et le dos BIOS Living. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance en indiquant le numéro de modèle de votre produit.

COMPREND :
1 coussin chauffant
1 mode d'emploi
1 manette portable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	PM067
Nom	Coussin chauffant pour le dos et les épaules
Tension d'entrée	120 V CA/60 Hz
Puissance nominale	135 W
Niveaux de chaleur	10 niveaux (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10)
Dimensions du produit	24 po x 36 po (61 cm x 91 cm)

⚠ DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.




1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. **NE PAS** UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
3. NE JAMAIS LAISSER CET APPAREIL SANS SURVEILLANCE, SURTOUT EN PRÉSENCE D'ENFANTS.
4. **NE PAS** UTILISER SUR UN NOURRISSON.
5. **NE PAS** UTILISER SUR UN ANIMAL.
6. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UNE PERSONNE INVALIDE, ENDORMIE OU INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT SOIGNEUSEMENT SURVEILLÉE.
7. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR UNE PERSONNE DIABÉTIQUE.
8. **NE PAS** UTILISER SUR LES ZONES DE PEAU INSENSIBLE.
9. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR, QUEL QUE SOIT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE. VÉRIFIEZ FRÉQUEMMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
10. **NE PAS** UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ LA TENEUR EN OXYGÈNE EST ÉLEVÉE.
11. **NE PAS** UTILISER D'ÉPINGLES OU D'AUTRES MOYENS MÉTALLIQUES POUR FIXER CE COUSSIN EN PLACE.
12. **NE PAS** S'ASSEOIR SUR LE COUSSIN OU L'ÉCRASER. ÉVITER LES PLIS SERRÉS.
13. PLACER LE COUSSIN SUR LE CORPS ET NON EN DESSOUS. LE NIVEAU DE CHALEUR PEUT AUGMENTER LORSQUE LA CHALEUR EST EMPRISONNÉE.
14. NE JAMAIS UTILISER CE COUSSIN AVEC DES LINIMENTS, DES ONGUENTS OU DES POMMADES, EN PARTICULIER CEUX QUI CONTIENNENT DES INGRÉDIENTS PRODUISANT DE LA CHALEUR, CAR DES BRÛLURES CUTANÉES POURRAIENT EN RÉSULTER.
15. NE JAMAIS TIRER CE COUSSIN PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.
16. NE JAMAIS DÉBRANCHER LE COUSSIN D'UNE PRISE ÉLECTRIQUE AVEC UNE MAIN MOUILLÉE.
17. SI VOUS UTILISEZ UNE RALLONGE AVEC CE COUSSIN, LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE MARQUÉE DU JEU DE CÂBLES OU DE LA RALLONGE DOIT ÊTRE AUSSI ÉLEVÉE QUE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE DU COUSSIN (VOIR LA SECTION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT). UTILISER CE COUSSIN UNIQUEMENT SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE DE 120 V CA. DÉBRANCHER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
18. **NE PAS** UTILISER LE CORDON COMME POIGNÉE.
19. **NE PAS** PLIER OU PINCER LE CORDON ET **NE PAS** UTILISER CE COUSSIN S'IL A UN CORDON D'ALIMENTATION OU UNE FICHE ENDOMMAGÉE, S'IL FONCTIONNE MAL, S'IL EST TOMBÉ OU S'IL EST ENDOMMAGÉ. CE COUSSIN NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
20. ENROULER LE CORDON SANS LE SERRER LORS DU RANGEMENT, UN ENROULEMENT SERRÉ RISQUE D'ENDOMMAGER LE CORDON ET LES PIÈCES INTERNES.
21. CE PRODUIT EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE PERSONNEL. **NE PAS** UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU À D'AUTRES FINS.
22. **NE PAS** NETTOYER À SEC. LES SOLVANTS DE NETTOYAGE À SEC PEUVENT AVOIR UN EFFET DÉTÉRIORANT SUR L'ISOLATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT.



Ce coussin chauffant est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) par mesure de sécurité. Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié.


NE TENTEZ PAS DE NEUTRALISER CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

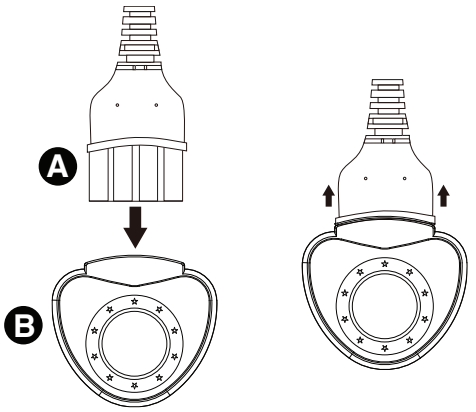

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS CE COUSSIN CHAUFFANT AVEC D'AUTRES COUSSINS CHAUFFANTS/COUVERTURES CHAUFFANTES SOUS LES DRAPS.

1. Fixer le connecteur du coussin (**B**) au connecteur de contrôle (**A**). Veiller à ce que les deux pièces soient bien ajustées avant de brancher l'appareil.

A : Connecteur de commande **B** : Connecteur du coussin

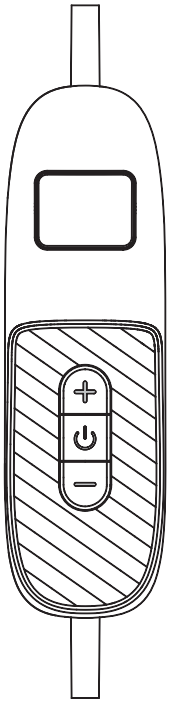

2. Pour mettre le coussin chauffant sous tension, brancher l'appareil dans une prise électrique de 120 V CA et appuyer sur le bouton d'alimentation. Le coussin commencera à chauffer. Le niveau de chaleur par défaut est L.
3. Appuyez sur « + » ou « – » pour sélectionner le réglage de chaleur désiré. Il y a 10 niveaux de chaleur :

L à 2 : Basse	**5 à 7 : Moyenne**
3 à 4 : Tiède	**8 à H : Élevée**

4. Le délai de mise hors tension automatique par défaut est de 120 minutes.
5. Pour mettre le coussin chauffant hors tension, appuyer sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Débrancher le coussin lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN

1. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. S'assurer que la prise du connecteur du coussin est débranchée du fil.
3. Laver le coussin à la machine ou à la main avec un détergent doux, à l'eau froide ou à l'eau tiède, la température de l'eau ne peut pas dépasser 86 °F (30 °C). Utilisez un cycle doux/délicat.
4. Suspendre pour sécher ou sécher à plat.
5. S'assurer que le produit est complètement sec avant la prochaine utilisation.
6. Pour ranger, rouler le coussin chauffant sans le serrer, puis rangez-le dans un endroit frais et sec après chaque utilisation. Évitez de plier le coussin chauffant.
7. **NE PAS** nettoyer à sec. Les solvants de nettoyage à sec peuvent avoir un effet détériorant sur l'isolation de l'élément chauffant.

GARANTIE D'UN AN

Le coussin chauffant pour les épaules et le dos comprend une garantie d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par son propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retourner le produit avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

C ETL LISTED US
Intertek
5027022

CONFORMS TO UL STD. 130 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO15

CONFORME À LA NORME UL130 HOMOLOGUÉ SELON LA NORME CSA C22.2 NO 15

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %