BIOS living™

Plateau repliable pour cadre de marche

56401

Instructions

Plateau léger, durable et polyvalent qui permet de garder à portée de main vos aliments, boissons, livres et effets personnels — l'accessoire idéal pour transporter vos articles partout où vous allez.

- Convient à la plupart des cadres de marche standards d'une largeur de 47 cm (18,5 po). Ne convient pas aux cadres de marche très larges pour personnes obèses.
- Aucun outil requis.
- Il se déploie, se verrouille en place et se replie facilement.
- Bord extérieur surélevé de 5 cm (2 po) prévenant les objets de tomber du plateau.
- Deux porte-gobelets encastrés pour garder les gobelets/bouteilles en place.
- Capacité pondérale de 2,2 kg (5 lb).


Dimensions (L. x l. x H.) : 40,5 cm x 30 cm x 4 cm (16 po x 12 po x 1,5 po).

Poids : 0,75 kg (1,62 lb).



Installation :

1. Fixez les quatre attaches sur les pattes du cadre de marche. Les attaches doivent être placées au-dessus des traverses supérieure et inférieure pour maintenir le plateau en place.
2. Une fois que les attaches sont bien fixées, relevez le plateau jusqu'à ce qu'il se verrouille en position horizontale.
3. Pour abaisser le plateau, soulevez-le doucement et faites glisser les supports métalliques vers l'avant pour le libérer.
4. Le plateau se replie à plat et ne nuit pas.
5. Capacité pondérale : 2,2 kg (5 lb.).

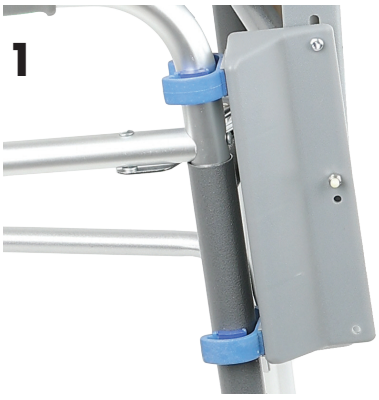

Fixez les quatre attaches aux pattes du cadre de marche



Relevez le plateau jusqu'à ce qu'il se verrouille en position horizontale



Pour abaisser, relevez doucement le plateau et faites glisser les supports métalliques vers l'avant pour le libérer



Le plateau se replie à plat et se range sans nuire

Garantie limitée d'un an

Le plateau repliable pour cadre de marche modèle 56401 est garanti pendant un an contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation, pour le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de transport. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

Paper
Papier